



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

📍 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

🌐 Altarim.ru
info@altarim.ru

☎ 8(8332)46-41-31

ПОМПЫ МИКРОИНФУЗИОННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Помпа инфузионная (микроинфузионная) – это одноразовое медицинское изделие, предназначенное для длительного, непрерывного и дозированного введения жидких лекарственных препаратов. Имеет широкое применение в анестезиологии, онкологии, скорой помощи, акушерстве, гематологии, неврологии, травматологии и ортопедии.

С помощью помпы инфузионный раствор можно вводить подкожно, внутривенно, эпидурально, внутриаартериально.

Микроинфузионные помпы состоят из резервуарного силиконового баллона, защищенного прочным корпусом из поликарбоната, инфузионной линии, фильтра, порта для заполнения, наконечника Луер-Лок и, в зависимости от типа помпы, могут иметь регулятор скорости, болюс или систему микроканалов.

ВИДЫ ПОМП МИКРОИНФУЗИОННЫХ

– С постоянным потоком

Обеспечивает непрерывное введение лекарственных средств с постоянной скоростью.

– С регулируемым потоком

Обеспечивает непрерывную инфузию препаратов с возможностью настраивать и менять скорость потока.

– С болюсным введением

Обеспечивает инфузию только болюсной дозы жидких лекарственных средств.




г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31

ПОМПЫ С ПОСТОЯННЫМ ПОТОКОМ

ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW

Наиболее часто применяется для антибактериальной терапии, химиотерапии, аналгезии, хелатирующей терапии с дефероксамином. Скорость потока помп Uniqueflow кодируется цветным вкладышем для скоростей до 13 мл/час включительно и цветной наклейкой перед наконечником типа Луер-Лок для скоростей инфузии 20 мл/час и более. Корпус изделия имеет высокую степень защиты от УФ-излучения, до 390 нм.

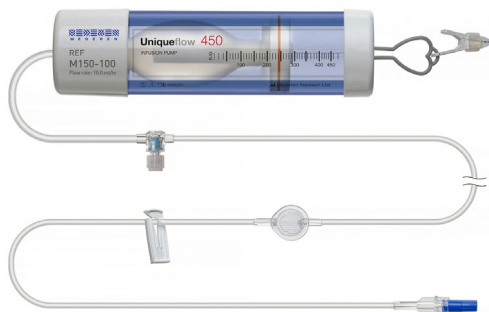


ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW ONCO

Используются в онкологии для проведения химиотерапии и аналгезии. Затемненный светозащитный корпус позволяет использовать микроинфузионную помпу для введения препаратов, которые могут выпадать в осадок под действием света, например, 5-фторурацил. Помпа имеет микроканал для обеспечения ламинарного потока раствора во время инфузии. Широкий диапазон скоростей, от 0,5 мл/час до 250 мл/час, и объемная линейка.

ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW B+


Снабжена болюсом для дополнительного введения препарата по потребности. Наиболее широко применяется при системном или региональном лечении острой и хронической боли. Широкий диапазон времени замка болюса от 6 до 60 минут и три варианта его объема (0,5 мл, 1 мл, 2 мл). Два фильтра, расположенные на входе и выходе из болюса, обеспечивают его эффективную работу и препятствуют попаданию в организм пациента мельчайших твердых частиц раствора.

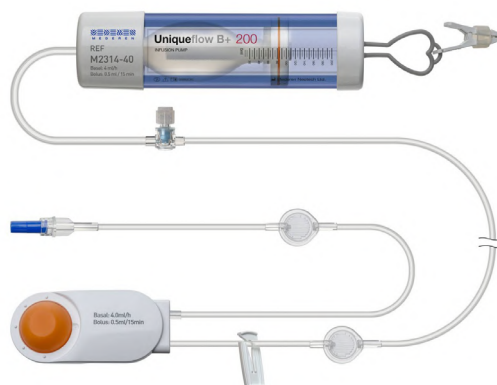

ПОМПЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОТОКОМ И ПОМПЫ С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ


ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW MULTI

Обеспечивает непрерывную инфузию препаратов с возможностью настраивать и менять скорость потока. В зависимости от модели помпа может иметь три или семь скоростей. Помпа с контролируемым потоком является решением для мультимодальной анестезии, послеоперационного обезбоживания, обезболивания родов. Регулятор скорости снабжен съемным ключом, что исключает непреднамеренное изменение скорости инфузии.

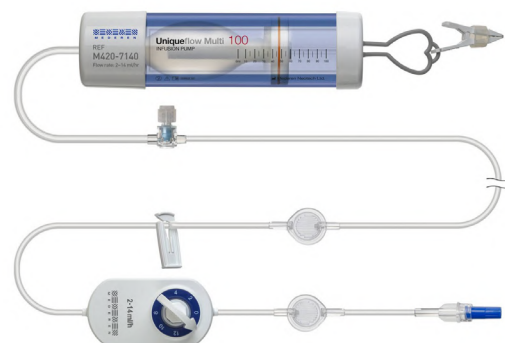

ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW MULTI B

Помпа с регулятором скорости потока и болюсом дает возможность не только настраивать и менять скорость, но и проводить дополнительную инъекцию препарата за счет блока пациент контролируемой анальгезии (ПКА). В зависимости от варианта исполнения инфузия может осуществляться в диапазоне семи скоростей с различным шагом: 0,5 мл/час, 1 мл/час, 2 мл/час. Помпа Uniqueflow Multi B идеально подходит для мультимодальной анестезии.

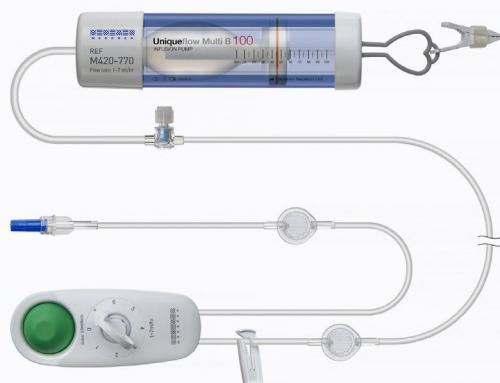

ИНФУЗИОННАЯ ПОМПА UNIQUEFLOW B

Применяется исключительно при пациент контролируемой анальгезии и обеспечивает инфузию только болюсной дозы жидких лекарственных средств. Помпа обеспечивает эффективное обезбоживание согласно индивидуальным потребностям пациента. Является альтернативой планового назначения анальгетика. Время блокировки болюса от 6 до 60 минут, три варианта размера болюса: 0,5 мл, 1 мл, 2 мл.



г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017
Altarim.ru
info@altarim.ru
8(8332)46-41-31